



## Mepilex – Silikonbeschichteter Schaumverband mit Safetac Technologie

- Minimiert Trauma und Schmerz beim Verbandwechsel<sup>1</sup>
- Absorbiert effektiv das überschüssige Exsudat und minimiert Mazerationen<sup>2</sup>
- Passt sich hervorragend den Körperkonturen an und gewährt optimalen Patientenkomfort

### Polyurethanschaum


- Absorbiert Exsudat
- Kann unter Kompression verwendet werden
- Passt sich den Körperkonturen an

### Safetac® Technologie

- Atraumatisch zur Wunde und zur wundumgebenden Haut
- Haftet nicht am feuchten Wundgrund, sondern nur auf trockenem Gewebe
- Minimiert das Mazerationsrisiko

### Polyurethanfilm

- Wasserdampfdurchlässig
- Wasserabweisend
- Viren- und bakterienundurchlässig

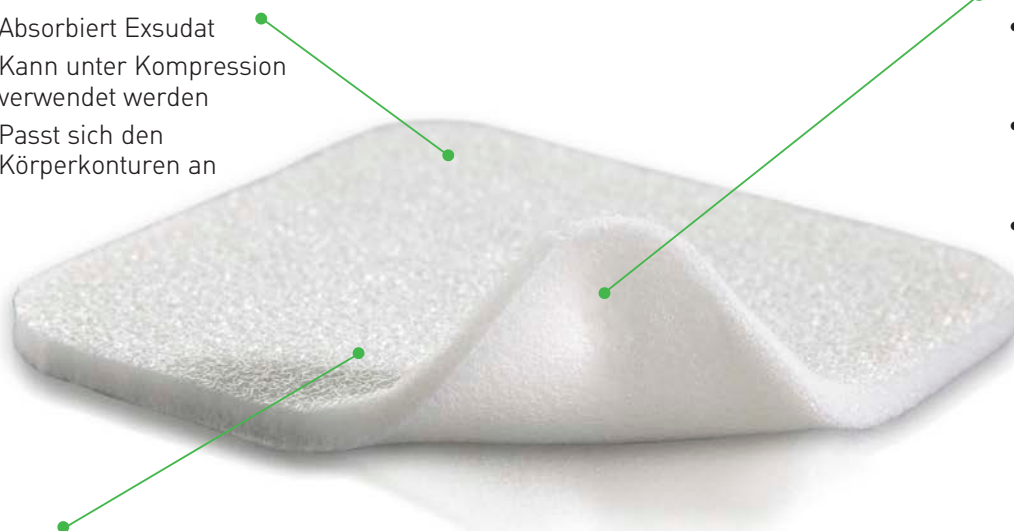


**Safetac**  
TECHNOLOGY

### Safetac® Technologie


#### Safetac® Technologie. Less trauma. Less pain.™

Safetac® ist eine patentierte, sanfte Silikon-Haftechnologie. Verbände mit Safetac® Technologie sind sowohl atraumatisch während des Tragens, als auch beim Entfernen. Dies bedeutet weniger Schmerz für den Patienten. Außerdem verhindern Verbände mit Safetac® Technologie Mazerationen, da die Wundränder versiegelt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.safetac.com](http://www.safetac.com).

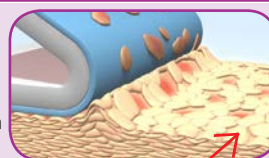

Entfernen von Epidermiszellen mit traditionellem Kleber

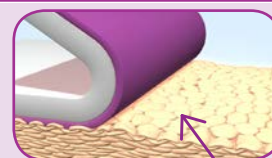

Kein Entfernen von Epidermiszellen mit der Safetac® Technologie

## Anwendungshinweise



Reinigen Sie die Wunde und entfernen Sie die Schutzfolie.



Mepilex sollte die Wunde mindestens 2 cm überlappen. Mepilex mit der haftenden Seite auf die Wunde applizieren. Den Verband nicht überdehnen.



Falls notwendig, fixieren Sie den Verband zusätzlich mit einem geeigneten Fixiermittel.

## Vorteile von Mepilex

- Minimiert Trauma und Schmerz beim Verbandwechsel
- Kann je nach Zustand mehrere Tage auf der Wunde verbleiben
- Verweilt während der Applikation des Fixierverbandes am Platz und ermöglicht eine einfache Handhabung
- Minimiert das Mazerationsrisiko
- Gewährt optimalen Patientenkomfort
- Kann unter Kompression verwendet werden
- Auf jede Größe zuschneidbar
- Sehr geringes Allergiepotezial<sup>3</sup>

## Hinweis

Im Falle von Anzeichen einer Infektion, ziehen Sie bitte medizinisches Fachpersonal zu Rate, um eine adäquate Behandlung der Infektion zu gewährleisten.

## Anwendungsgebiete

Mepilex<sup>®</sup> ist für eine Vielzahl von flachen, nässenden Wunden geeignet wie z.B.:

- Bein- und Fußgeschwüre
- Druckgeschwüre
- Traumatische Wunden



References: 1 Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. J Wound Care 2001; 10(2):7-10. Principles of best practice: Minimising pain at wound dressing-related procedures. A consensus document. London: MEP Ltd, 2004, 2 Data on file, 3 Dykes PJ. The effect of adhesive dressing edges on cutaneous irritation and skin barrier function. J Wound Care 2007; 16(3):97-100.



### Sortiment Mepilex ist einzeln steril verpackt)

| Art.-Nr.   | Größe (cm) | PZN Packung | Stück Packung | Stück Karton |
|------------|------------|-------------|---------------|--------------|
| 29 41 00*  | 10 x 10    | ---         | 5             | 70           |
| 29 42 00*  | 10 x 20    | ---         | 5             | 50           |
| 29 43 00*  | 15 x 15    | ---         | 5             | 60           |
| 29 44 00*  | 20 x 00    | ---         | 2             | 12           |
| 29 41 50** | 10 x 12    | 16 03 338   | 5             | 50           |
| 29 42 50** | 12 x 20    | 16 03 350   | 5             | 50           |
| 29 43 50** | 15 x 17    | 16 03 373   | 5             | 25           |
| 29 44 50** | 20 x 22    | 16 03 404   | 5             | 20           |
| 294500     | 20 x 50    | 12 35 461   | 2             | 10           |

|              |         |           |   |    |
|--------------|---------|-----------|---|----|
| Mepilex Heel |         |           |   |    |
| 28 81 00     | 13 x 20 | 47 91 062 | 5 | 25 |

Verbandmittel sind CE geprüfte Medizinprodukte und keine Arzneimittel!  
Verbandmittel sind weiterhin verordnungsfähig.

\* Krankenhaus Sortiment \*\* Home Care Sortiment

Mölnlycke Health Care GmbH  
Max-Planck-Str. 15 · 40699 Erkrath-Unterfeldhaus  
Tel.: 0211/92088-0 · Fax: 0211/92088-170  
[www.molnlycke.com](http://www.molnlycke.com) · [www.safetac.com](http://www.safetac.com)

Mepilex<sup>®</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen von Mölnlycke Health Care.

