

## Transurethrale Katheter

# Norta® Latex

## Der Ballonkatheter Norta® Latex für akute Entleerungsstörungen bei kurzen Liegezeiten.

### Produkt

Eine komplikationsfreie Katheterisierung hängt unter anderem von der Materialbeschaffenheit des Katheters ab. Norta® Latex ist ausreichend führungsstabil, dabei aber flexibel und weich. Insbesondere seine gute Bioverträglichkeit zeichnet ihn aus.


Der Katheter lässt sich problemlos und sicher fixieren. Beim Entfernen besteht keine Verletzungsgefahr der Urethra. Spritzen und marktübliche Urinauffangsysteme können sicher mit dem Katheter konnektiert werden.

Der transurethrale Blasenverweilkatheter Norta® Latex schont mit seiner silikonisierten Oberfläche die Schleimhaut beim Einführen. Die Ränder der Augen sind glatt, deshalb besteht keine Traumatisierungsgefahr und die Entfernung ist ohne Verletzungsrisiko. Die Ausrichtung der Tiemann-Spitze und die Ausstülpung am Funnel stimmen überein. So bleibt die Ausrichtung bei liegendem Katheter erkennbar. Die symmetrischen Ballons verfügen über eine 50 %ige Sicherheitsreserve. Norta® Latex ist gut verträglich und hat ein niedriges Keimwanderungsrisiko bei Anwendung mit einem geschlossenen Drainagesystem.

Norta® Latex besteht aus mehrfach gereinigtem Latex und einer silikonisierten Oberfläche.




Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.

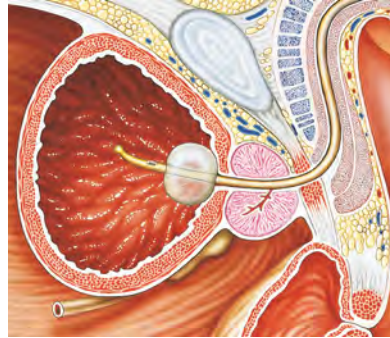

Anwendungsfreundlich durch Flexibilität bei hoher Festigkeit.

### Anwendungsgebiete

- akute und chronische Blasenentleerungsstörungen
  - intra- und postoperative Harnableitung
  - Harnableitung zur Urinmessung, z.B. Intensivtherapie, Infusionstherapie
- Anwendungsdauer: kurzzeitig, bis zu 5 Tagen

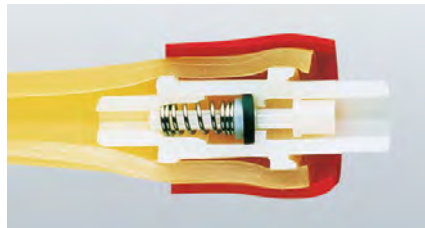

Sichere Konnektierung mit Urinauffangsystemen wie z.B. dem Norta® Urobag.

### Lieferformen

| Best.-Nr. | Kaliber/Charrière | Volumen | Länge | Verp.-Einheit |
|-----------|-------------------|---------|-------|---------------|
|-----------|-------------------|---------|-------|---------------|

#### Norta® Latex

einzel steril eingesiegelt

Nelaton-Spitze, Hartventil (Erwachsene)

|       |                                  |       |       |       |
|-------|----------------------------------|-------|-------|-------|
| 09385 | 12/14/16/18/20<br>22/24/26/28/30 | 10 ml | 40 cm | 5/100 |
|-------|----------------------------------|-------|-------|-------|

|       |                                  |       |       |       |
|-------|----------------------------------|-------|-------|-------|
| 09384 | 12/14/16/18/20<br>22/24/26/28/30 | 30 ml | 40 cm | 5/100 |
|-------|----------------------------------|-------|-------|-------|

Nelaton-Spitze (Kinder)

|       |        |      |       |       |
|-------|--------|------|-------|-------|
| 09413 | 6/8/10 | 5 ml | 29 cm | 5/100 |
|-------|--------|------|-------|-------|

Tiemann-Spitze (Erwachsene)

|       |                            |       |       |       |
|-------|----------------------------|-------|-------|-------|
| 09386 | 12/14/16/18/20<br>22/24/26 | 10 ml | 40 cm | 5/100 |
|-------|----------------------------|-------|-------|-------|



(siehe detaillierte Bestellübersicht Seite 186)

# Norta® Latex plus

**Der Verweilkatheter aus Latex und Silikon mit mehr Sicherheit, mehr Tragekomfort und mehr Wirtschaftlichkeit.**

## Produkt

Der Langzeit-Verweilkatheter zur transurethralen Urindrainage kombiniert 2 Materialien.

Die fest verankerte Silikonbeschichtung auf der Katheterinnen- und Katheteraußenseite von Norta® Latex plus wirkt abweisend gegenüber Flüssigkeiten, Salzen und Keimen. Das senkt die Gefahr von Inkrustationen und verbessert die Schleimhautverträglichkeit im Vergleich zu Latexkathetern. Das Ergebnis: Norta® Latex plus bietet mehr Therapiesicherheit bei längeren Liegezeiten, bessere Trageeigenschaften und mehr Wirtschaftlichkeit.

Norta® Latex plus besteht aus einem flexiblen Latexkorpus und einer fest verankerten Silikonschicht an der Katheterinnen- und Katheteraußenseite.




Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.



Kombiniert die Vorteile zweier Kathetermaterialien.

## Anwendungsgebiete

- Langzeittherapie bei chronischen Entleerungsstörungen
  - intra- oder postoperative Ruhigstellung der Blase
  - Bilanzierung des Wasserhaushaltes während der Intensivbehandlung und der Infusionstherapie
- Anwendungsdauer: Liegezeiten bis zu 4 Wochen

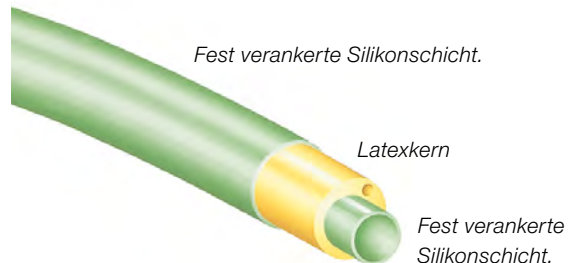

## Lieferformen

| Best.-Nr.                                     | Kaliber/Charrière | Volumen | Länge | Verp.-Einheit |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------|-------|---------------|
| <b>Norta® Latex plus</b>                      |                   |         |       |               |
| Nelaton-Spitze, einzeln steril eingeschiegelt |                   |         |       |               |
| 47485                                         | 12/14/16/18       | 10 ml   | 41 cm | 10/200        |
|                                               | 20/22/24/26       |         |       |               |
| Tiemann-Spitze, einzeln steril eingeschiegelt |                   |         |       |               |
| 47486                                         | 12/14/16/18       | 10 ml   | 41 cm | 10/200        |
|                                               | 20/22             |         |       |               |



(detaillierte Bestellübersicht Seite 186)

## Transurethrale Katheter

# Norta® Silikon

## Der Ballonkatheter aus 100 % Silikon für die transurethrale Blasendrainage.

### Produkt

Norta® Silikon bietet sowohl einen hohen Tragekomfort als auch eine hohe Drainageleistung. Größere Koagula und Sedimente passieren den Vollsilkonkatheter ungehindert. Norta® Silikon ist führungsstabil und flexibel. Beim Einführen wird die Schleimhaut geschont. Eine Kontrolle der Katheterposition ist durch den integrierten Röntgenkontraststreifen möglich. Spritzen und marktübliche Urinauffangsysteme können sicher mit dem Katheter konnektiert werden.


Norta® Silikon ist prädestiniert für die langfristige transurethrale Harnableitung. Die homogene, glatte Oberfläche des Vollsilkonkatheters ist abweisend gegenüber der Adhärenz von Keimen und der Ablagerung von Salzen. Darüber hinaus ist Norta® Silikon der Katheter der Wahl bei jeglichem Verdacht auf Latexallergien. Nach dem Entblocken legt sich der Ballon flach an den Katheterschaft, wodurch der Katheter leicht und ohne Verletzungsgefahr für die Urethra entfernbar ist.

Zusätzlich hat Norta® Silikon ein geringes Risiko einer retrograden Keimwanderung.

Norta® Silikon besteht aus Silikon mit geringem Anteil an Polypropylen.



Latexfreie Rezeptur

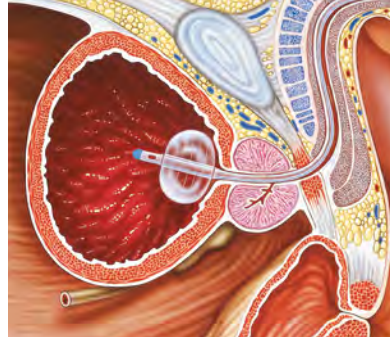

Sicherheit bei langen Liegezeiten.

### Anwendungsgebiete

- akute und chronische Blasenentleerungsstörungen
- intra- und postoperative Harnableitung
- Harnableitung zur Urinmessung, z.B. Intensivtherapie, Infusionstherapien
- postoperative Versorgung nach radikaler Prostatektomie und Zystektomie

Anwendungsdauer: Langzeiteinsatz bis zu 6 Wochen möglich



Die flexible Spitze macht das Einführen problemlos, die glatten Ränder der Augen verhindern Schleimhautverletzungen.

### Lieferformen

| Best.-Nr. | Kaliber/Charrière | Volumen | Länge | Verp.-Einheit |
|-----------|-------------------|---------|-------|---------------|
|-----------|-------------------|---------|-------|---------------|

#### Norta® Silikon

einzelnen steril eingeschleut

Nelaton-Spitze (Erwachsene)

|       |                      |       |       |        |
|-------|----------------------|-------|-------|--------|
| 09400 | 12/14/16/18/20/22/24 | 10 ml | 42 cm | 10/100 |
|-------|----------------------|-------|-------|--------|

|       |             |       |       |        |
|-------|-------------|-------|-------|--------|
| 09410 | 18/20/22/24 | 30 ml | 42 cm | 10/100 |
|-------|-------------|-------|-------|--------|

Nelaton-Spitze (Kinder)

|       |   |        |         |        |
|-------|---|--------|---------|--------|
| 09437 | 6 | 1,5 ml | 31,5 cm | 10/100 |
|-------|---|--------|---------|--------|

|       |   |      |         |        |
|-------|---|------|---------|--------|
| 09437 | 8 | 3 ml | 31,5 cm | 10/100 |
|-------|---|------|---------|--------|

|       |    |      |         |        |
|-------|----|------|---------|--------|
| 09437 | 10 | 5 ml | 31,5 cm | 10/100 |
|-------|----|------|---------|--------|



(detaillierte Bestellübersicht Seite 186)

# Norta® Latex Dauerspülkatheter

## Der Dauerspülkatheter nach Operationen und zur Medikation der Harnblase.


### Produkt

Größere Eingriffe im Urogenitalbereich stellen hohe Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von postoperativen Kathetern. Der Norta® Latex Dauerspülkatheter ermöglicht eine kontinuierliche Blasenspülung mit größeren Spülmengen, wodurch eine optimale Flüssigkeitsdurchspülung der Blase gewährleistet wird. Durch seine silikonisierte Oberfläche ist der Katheter inkrustationsresistent und schont die Schleimhaut schon beim Einführen. Spritzen und marktübliche Urinauffangsysteme können sicher mit dem Katheter konnektiert werden. Der großlumige Norta® Latex Dauerspülkatheter hat eine Nelaton-Spitze mit 2 großen Drainageaugen, die für ein zuverlässiges Ausspülen von Koagula, Sedimenten und Resektionsstücken sorgen. Der symmetrische Ballon verfügt über eine 50%ige Sicherheitsreserve. Beim Entblocken legt er sich flach an den Katheterschaft an. Dadurch ist der Katheter jederzeit leicht und ohne Verletzungsgefahr für die Urethra entfernbar.

Norta® Latex Dauerspülkatheter bestehen aus mehrfach gereinigtem Latex und einer silikonisierten Oberfläche.




Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.

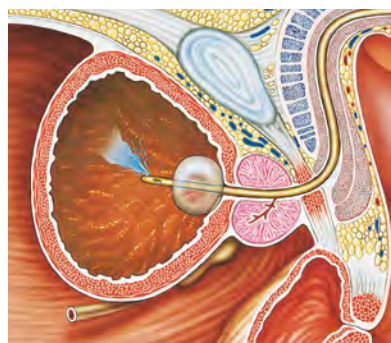

Optimale  
Blasenspülung.  
Gute Drainage-  
leistung.

### Anwendungsgebiete

Der Norta® Latex Dauerspülkatheter wurde speziell für den Einsatz nach Operationen entwickelt. Er eignet sich für alle Indikationen, bei denen eine kontinuierliche Blasenspülung indiziert ist. Anwendungsdauer: kurzzeitig, bis zu 5 Tagen

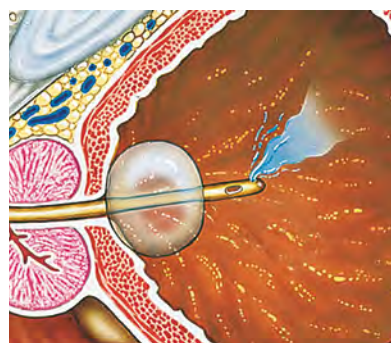

Das Spülmedium  
breitet sich  
gleichmäßig in der  
Blase aus.

### Lieferformen

| Best.-Nr. | Kaliber/<br>Charrière | Volumen | Länge | Verp.-Einheit |
|-----------|-----------------------|---------|-------|---------------|
|-----------|-----------------------|---------|-------|---------------|

#### Norta® Latex Dauerspülkatheter

einzel steril eingeschiegelt

Nelaton-Spitze

|       |                      |       |       |       |
|-------|----------------------|-------|-------|-------|
| 09388 | 16/18/20<br>22/24/26 | 10 ml | 40 cm | 5/100 |
| 09380 | 16/18/20<br>22/24/26 | 30 ml | 40 cm | 5/100 |



(detaillierte Bestellübersicht Seite 187)


## Transurethrale Katheter

# Norta® Latex Hämaturie-Katheter

## Der Hämaturie-Katheter zum Absaugen von Koagula und Sedimenten.

### Produkt

Um Koagula und Sedimente komplikationsfrei aus der Blase entfernen zu können, muss ein Katheter einen entsprechend großen Innendurchmesser haben. Außerdem darf er bei Unterdruck nicht kollabieren. Der Norta® Latex Hämaturie-Katheter verfügt über die erforderliche hohe Drainageleistung. Größere Koagula, Sedimente und Resektionsstücke passieren den Katheter ungehindert. Der symmetrische Ballon ist leicht zu blocken, besonders widerstandsfähig und verfügt über eine 50%ige Sicherheitsreserve. Der Norta® Latex Hämaturie-Katheter, der als 2-Weg-Katheter und 3-Weg-Katheter erhältlich ist, verfügt über eine integrierte, sehr flexible Polyamidspirale zur Verstärkung des Katheterschaftes. Der Drainagekanal erhält dadurch eine hohe Stabilität und kollabiert auch bei Unterdruck nicht. In der postoperativen Versorgung nach transurethralen Resektionen der Prostata kleineren Volumens ist die Prostataloge zuverlässig zu tamponieren. Der 3-Weg-Katheter ermöglicht eine kontinuierliche Blasenspülung mit größeren Flüssigkeitsmengen, wodurch eine optimale Flüssigkeitsdurchspülung der Blase gewährleistet wird. Der Norta® Latex Hämaturie-Katheter ist inkrustationsresistent, führungsstabil und gut verträglich.

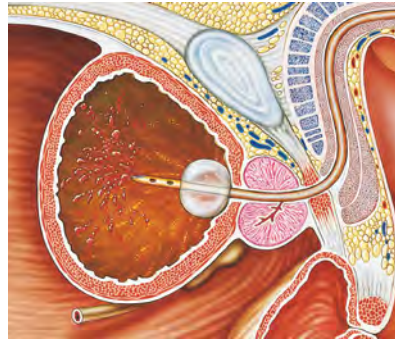

*Sichere Drainage auch bei Aspiration.*

Norta® Latex Hämaturie-Katheter bestehen aus mehrfach gereinigtem Latex und einer silikonisierten Oberfläche.



Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.

### Anwendungsgebiete

Der Norta® Latex Hämaturie-Katheter wurde speziell für das Absaugen von Blutkoagula und Sedimenten entwickelt. Er ist indiziert bei

- transurethraler Resektion der Prostata kleineren Volumens
- transurethraler Resektion der Blase

Anwendungsdauer: kurzzeitig, bis zu 5 Tagen



*Die große Drainageöffnung ermöglicht das Absaugen von größeren Koagula, Sedimenten und Resektionsstücken.*

### Lieferformen

| Best.-Nr.                                 | Kaliber/Charrière | Volumen | Länge | Verp.-Einheit |
|-------------------------------------------|-------------------|---------|-------|---------------|
| <b>Norta® Latex Hämaturie-Katheter</b>    |                   |         |       |               |
| einzeln steril eingesiegelt               |                   |         |       |               |
| <b>2-Weg-verstärkt, Couvelaire-Spitze</b> |                   |         |       |               |
| 09394                                     | 18/20/22/24/26    | 30 ml   | 40 cm | 5/100         |
| <b>3-Weg-verstärkt, Nelaton-Spitze</b>    |                   |         |       |               |
| 09390                                     | 18/20/22/24/26    | 30 ml   | 40 cm | 5/100         |
| <b>3-Weg-verstärkt, Couvelaire-Spitze</b> |                   |         |       |               |
| 09395                                     | 18/20/22/24/26    | 30 ml   | 40 cm | 5/100         |



(detaillierte Bestellübersicht Seite 187)

# Norta® Latex Tamponade-Katheter

## Tamponade-Katheter aus Latex zur sicheren Gefäßkompression nach Prostata-OP.

### Produkt


Nach größeren Operationen an der Prostata sichert der Norta® Latex Tamponade-Katheter die transurethrale Drainage. Auch größere Koagula, Sedimente und Resektionsstücke werden über den Katheter zuverlässig ausgespült. Norta® Latex Tamponade-Katheter verfügen über widerstandsfähige Ballons mit großem Volumen.

Die in den Schaft integrierte Polyamidspirale verleiht dem Drainagekanal hohe Stabilität, so dass er auch bei Unterdruck nicht kollabiert. Die Ausrichtung der gebogenen Spitzen und die Ausstülpung der Funnel stimmen überein. Das mit einer zusätzlichen 50%igen Sicherheitsreserve ausgestattete Ballonvolumen ermöglicht auch bei großen Resektionen eine zuverlässige Tamponade der Prostataloge. Der 3-Weg-Katheter verfügt über eine kontinuierliche Blasendurchspülung.

Norta® Latex Tamponade-Katheter besteht aus mehrfach gereinigtem Latex und einer silikonisierten Oberfläche.



Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.

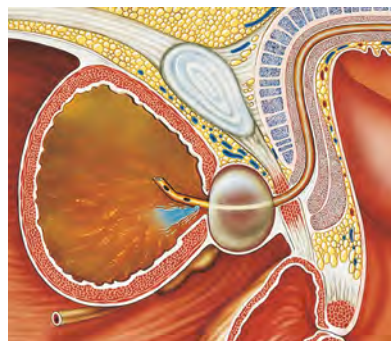

Sichere Drainage auch bei Aspiration.

### Anwendungsgebiete

Der Norta® Latex Tamponade-Katheter wurde speziell für die Tamponade der Prostataloge nach größeren Eingriffen entwickelt. Seine Anwendung ist indiziert bei

- transurethraler Resektion der Prostata
- transvesikaler Adenomektomie

Anwendungsdauer: kurzzeitig, bis zu 5 Tagen



Je nach Indikation stehen 3 Spitzenformen mit verschiedenen großen Drainageöffnungen und speziell angeordneten Augen zur Wahl: nach Frohmüller, Mercier und Dufour.

### Lieferformen

| Best.-Nr. | Kaliber/Charrière | Volumen | Länge |
|-----------|-------------------|---------|-------|
|-----------|-------------------|---------|-------|

#### Norta® Latex Tamponade-Katheter

einzel steril eingeseiegelt

2-Weg-verstärkt, Mercier-Spitze

|       |                |       |       |
|-------|----------------|-------|-------|
| 09392 | 18/20/22/24/26 | 60 ml | 41 cm |
|-------|----------------|-------|-------|

3-Weg-verstärkt, Dufour-Spitze

|       |                |       |       |
|-------|----------------|-------|-------|
| 09396 | 18/20/22/24/26 | 60 ml | 41 cm |
|-------|----------------|-------|-------|

3-Weg-verstärkt, Mercier-Spitze

|       |                |       |       |
|-------|----------------|-------|-------|
| 09397 | 18/20/22/24/26 | 60 ml | 41 cm |
|-------|----------------|-------|-------|

3-Weg-verstärkt, Frohmüller-Spitze

|       |                |       |       |
|-------|----------------|-------|-------|
| 09398 | 18/20/22/24/26 | 60 ml | 41 cm |
|-------|----------------|-------|-------|



(detaillierte Bestellübersicht Seite 187)

# Norta® Katheter Bestellübersicht

## Norta® Latex

| Best.-Nr. | Kaliber/Charrière | Verp.-Einheit | PZN |
|-----------|-------------------|---------------|-----|
|-----------|-------------------|---------------|-----|

einzel steril eingeschiegelt

### Nelaton-Spitze, Hartventil, 41 cm (Erw.)

Hilfsmittelverzeichnis: 15.25.15.5023

|         |              |        |         |
|---------|--------------|--------|---------|
| 0938512 | 12 Ch, 10 ml | 10/200 | 2193486 |
| 0938514 | 14 Ch, 10 ml | 10/200 | 2193492 |
| 0938516 | 16 Ch, 10 ml | 10/200 | 2193500 |
| 0938518 | 18 Ch, 10 ml | 10/200 | 2193517 |
| 0938520 | 20 Ch, 10 ml | 10/200 | 2193523 |
| 0938522 | 22 Ch, 10 ml | 10/200 | 2193546 |
| 0938524 | 24 Ch, 10 ml | 10/200 | 2193552 |
| 0938526 | 26 Ch, 10 ml | 10/200 | 2193569 |
| 0938528 | 28 Ch, 10 ml | 10/200 | 2193575 |
| 0938530 | 30 Ch, 10 ml | 10/200 | 2193581 |
| 0938412 | 12 Ch, 30 ml | 10/200 | 8426201 |
| 0938414 | 14 Ch, 30 ml | 10/200 | 8426218 |
| 0938416 | 16 Ch, 30 ml | 10/200 | 2193612 |
| 0938418 | 18 Ch, 30 ml | 10/200 | 2193629 |
| 0938420 | 20 Ch, 30 ml | 10/200 | 2193635 |
| 0938422 | 22 Ch, 30 ml | 10/200 | 2195054 |
| 0938424 | 24 Ch, 30 ml | 10/200 | 2195060 |
| 0938426 | 26 Ch, 30 ml | 10/200 | 2195077 |
| 0938428 | 28 Ch, 30 ml | 10/200 | 2195083 |
| 0938430 | 30 Ch, 30 ml | 10/200 | 2195108 |

### Nelaton-Spitze, 29 cm (Kinder)

Hilfsmittelverzeichnis: 15.25.15.5028


|         |             |        |         |
|---------|-------------|--------|---------|
| 0941306 | 6 Ch, 3 ml  | 10/200 | 8426224 |
| 0941308 | 8 Ch, 5 ml  | 10/200 | 2195290 |
| 0941310 | 10 Ch, 5 ml | 10/200 | 2195309 |

### Tiemann-Spitze, 41 cm (Erwachsene)

Hilfsmittelverzeichnis: 15.25.15.5025

|         |              |        |         |
|---------|--------------|--------|---------|
| 0938612 | 12 Ch, 10 ml | 10/200 | 2195315 |
| 0938614 | 14 Ch, 10 ml | 10/200 | 2195321 |
| 0938616 | 16 Ch, 10 ml | 10/200 | 2195338 |
| 0938618 | 18 Ch, 10 ml | 10/200 | 2195344 |
| 0938620 | 20 Ch, 10 ml | 10/200 | 2195350 |
| 0938622 | 22 Ch, 10 ml | 10/200 | 2195367 |
| 0938624 | 24 Ch, 10 ml | 10/200 | 2195373 |
| 0938626 | 26 Ch, 10 ml | 10/200 | 2195396 |

(Beschreibung siehe Seite 180)

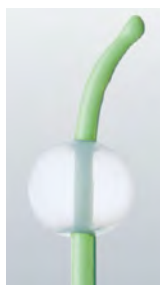

Tiemann-Spitze.



Nelaton-, Couvelaire-Spitze.

## Norta® Latex plus

| Best.-Nr. | Kaliber/Charrière | Verp.-Einheit | PZN |
|-----------|-------------------|---------------|-----|
|-----------|-------------------|---------------|-----|

einzel steril eingeschiegelt

### Nelaton-Spitze, mit Hartventil, 41 cm

Hilfsmittelverzeichnis: 15.25.15.1140

|         |              |        |         |
|---------|--------------|--------|---------|
| 4748512 | 12 Ch, 10 ml | 10/200 | 2138470 |
| 4748514 | 14 Ch, 10 ml | 10/200 | 2138487 |
| 4748516 | 16 Ch, 10 ml | 10/200 | 2138665 |
| 4748518 | 18 Ch, 10 ml | 10/200 | 2138671 |
| 4748520 | 20 Ch, 10 ml | 10/200 | 2138688 |
| 4748522 | 22 Ch, 10 ml | 10/200 | 2138895 |
| 4748524 | 24 Ch, 10 ml | 10/200 | 2138903 |
| 4748526 | 26 Ch, 10 ml | 10/200 | 2516707 |

### Tiemann-Spitze, mit Hartventil, 41 cm

Hilfsmittelverzeichnis: 15.25.15.1141

|         |              |        |         |
|---------|--------------|--------|---------|
| 4748612 | 12 Ch, 10 ml | 10/200 | 2516713 |
| 4748614 | 14 Ch, 10 ml | 10/200 | 2516742 |
| 4748616 | 16 Ch, 10 ml | 10/200 | 2516759 |
| 4748618 | 18 Ch, 10 ml | 10/200 | 2516802 |
| 4748620 | 20 Ch, 10 ml | 10/200 | 2516877 |
| 4748622 | 22 Ch, 10 ml | 10/200 | 2516883 |

(Beschreibung siehe Seite 181)

## Norta® Silikon

| Best.-Nr. | Kaliber/Charrière | Verp.-Einheit | PZN |
|-----------|-------------------|---------------|-----|
|-----------|-------------------|---------------|-----|

einzel steril eingeschiegelt

### Nelaton-Spitze, 42 cm (Erwachsene)

Hilfsmittelverzeichnis: 15.25.15.6061

|         |              |        |         |
|---------|--------------|--------|---------|
| 0940012 | 12 Ch, 10 ml | 10/100 | 7409873 |
| 0940014 | 14 Ch, 10 ml | 10/100 | 7409896 |
| 0940016 | 16 Ch, 10 ml | 10/100 | 7409904 |
| 0940018 | 18 Ch, 10 ml | 10/100 | 7409910 |
| 0940020 | 20 Ch, 10 ml | 10/100 | 7409927 |
| 0940022 | 22 Ch, 10 ml | 10/100 | 7409933 |
| 0940024 | 24 Ch, 10 ml | 10/100 | 7409956 |
| 0941018 | 18 Ch, 30 ml | 10/100 | 4080579 |
| 0941020 | 20 Ch, 30 ml | 10/100 | 7409985 |
| 0941022 | 22 Ch, 30 ml | 10/100 | 7410787 |
| 0941024 | 24 Ch, 30 ml | 10/100 | 7409991 |

### Nelaton-Spitze, 32 cm (Kinder)

Hilfsmittelverzeichnis: 15.25.15.6062

|         |              |        |         |
|---------|--------------|--------|---------|
| 0943706 | 6 Ch, 1,5 ml | 10/100 | 8666690 |
| 0943708 | 8 Ch, 3 ml   | 10/100 | 7410008 |
| 0943710 | 10 Ch, 5 ml  | 10/100 | 7410014 |

(Beschreibung siehe Seite 182)

## Norta® Latex Dauerspülkatheter

| Best.-<br>Nr. | Kaliber/<br>Charrière | Verp.-<br>Einheit | PZN |
|---------------|-----------------------|-------------------|-----|
|---------------|-----------------------|-------------------|-----|

einzeln steril eingeschiegelt

### Nelaton-Spitze, 41 cm

Hilfsmittelverzeichnis: 15.25.15.3015

|         |              |       |         |
|---------|--------------|-------|---------|
| 0938816 | 16 Ch, 10 ml | 5/100 | 2195491 |
| 0938818 | 18 Ch, 10 ml | 5/100 | 2195516 |
| 0938820 | 20 Ch, 10 ml | 5/100 | 2195522 |
| 0938822 | 22 Ch, 10 ml | 5/100 | 2195539 |
| 0938824 | 24 Ch, 10 ml | 5/100 | 2195545 |
| 0938826 | 26 Ch, 10 ml | 5/100 | 2195551 |
| 0938016 | 16 Ch, 30 ml | 5/100 | 2195568 |
| 0938018 | 18 Ch, 30 ml | 5/100 | 2195574 |
| 0938020 | 20 Ch, 30 ml | 5/100 | 2195580 |
| 0938022 | 22 Ch, 30 ml | 5/100 | 2195597 |
| 0938024 | 24 Ch, 30 ml | 5/100 | 2195605 |
| 0938026 | 26 Ch, 30 ml | 5/100 | 2195611 |

(Beschreibung siehe Seite 183)

## Norta® Latex Hämaturie-Katheter

| Best.-<br>Nr. | Kaliber/<br>Charrière | Verp.-<br>Einheit | PZN |
|---------------|-----------------------|-------------------|-----|
|---------------|-----------------------|-------------------|-----|

**2-Weg-verstärkt**, einzeln steril eingeschiegelt

### Couvelaire-Spitze, 41 cm

Hilfsmittelverzeichnis: 15.25.15.5027

|         |              |       |         |
|---------|--------------|-------|---------|
| 0939418 | 18 Ch, 30 ml | 5/100 | 2195686 |
| 0939420 | 20 Ch, 30 ml | 5/100 | 2195692 |
| 0939422 | 22 Ch, 30 ml | 5/100 | 2195700 |
| 0939424 | 24 Ch, 30 ml | 5/100 | 2195717 |
| 0939426 | 26 Ch, 30 ml | 5/100 | 2195723 |

**3-Weg-verstärkt**, einzeln steril eingeschiegelt

### Nelaton-Spitze, 41 cm

Hilfsmittelverzeichnis: 15.25.15.3016

|         |              |       |         |
|---------|--------------|-------|---------|
| 0939018 | 18 Ch, 30 ml | 5/100 | 2195746 |
| 0939020 | 20 Ch, 30 ml | 5/100 | 2195752 |
| 0939022 | 22 Ch, 30 ml | 5/100 | 2195769 |
| 0939024 | 24 Ch, 30 ml | 5/100 | 2195775 |
| 0939026 | 26 Ch, 30 ml | 5/100 | 2195781 |

### Couvelaire-Spitze, 41 cm

Hilfsmittelverzeichnis: 15.25.15.3017

|         |              |       |         |
|---------|--------------|-------|---------|
| 0939518 | 18 Ch, 30 ml | 5/100 | 2195798 |
| 0939520 | 20 Ch, 30 ml | 5/100 | 2195806 |
| 0939522 | 22 Ch, 30 ml | 5/100 | 2195812 |
| 0939524 | 24 Ch, 30 ml | 5/100 | 2195829 |
| 0939526 | 26 Ch, 30 ml | 5/100 | 2195835 |

(Beschreibung siehe Seite 184)

## Norta® Latex Tamponade-Katheter

| Best.-<br>Nr. | Kaliber/<br>Charrière | Verp.-<br>Einheit | PZN |
|---------------|-----------------------|-------------------|-----|
|---------------|-----------------------|-------------------|-----|

**2-Weg-verstärkt**, einzeln steril eingeschiegelt

### Mercier-Spitze, 41 cm

Hilfsmittelverzeichnis: 15.25.15.5026

|         |              |       |         |
|---------|--------------|-------|---------|
| 0939218 | 18 Ch, 60 ml | 5/100 | 3365699 |
| 0939220 | 20 Ch, 60 ml | 5/100 | 3365707 |
| 0939222 | 22 Ch, 60 ml | 5/100 | 3365713 |
| 0939224 | 24 Ch, 60 ml | 5/100 | 3365736 |
| 0939226 | 26 Ch, 60 ml | 5/100 | 3365742 |

**3-Weg-verstärkt**, einzeln steril eingeschiegelt

### Dufour-Spitze, 41 cm

Hilfsmittelverzeichnis: 15.25.15.3018

|         |              |       |         |
|---------|--------------|-------|---------|
| 0939618 | 18 Ch, 60 ml | 5/100 | 3248278 |
| 0939620 | 20 Ch, 60 ml | 5/100 | 3248284 |
| 0939622 | 22 Ch, 60 ml | 5/100 | 3248290 |
| 0939624 | 24 Ch, 60 ml | 5/100 | 3248309 |
| 0939626 | 26 Ch, 60 ml | 5/100 | 3248315 |

### Mercier-Spitze, 41 cm

Hilfsmittelverzeichnis: 15.25.15.3019

|         |              |       |         |
|---------|--------------|-------|---------|
| 0939718 | 18 Ch, 60 ml | 5/100 | 3248321 |
| 0939720 | 20 Ch, 60 ml | 5/100 | 3248338 |
| 0939722 | 22 Ch, 60 ml | 5/100 | 3248344 |
| 0939724 | 24 Ch, 60 ml | 5/100 | 3248350 |
| 0939726 | 26 Ch, 60 ml | 5/100 | 3248367 |

### Frohmüller-Spitze, 41 cm

Hilfsmittelverzeichnis: 15.25.15.3020

|         |              |       |         |
|---------|--------------|-------|---------|
| 0939818 | 18 Ch, 60 ml | 5/100 | 3248373 |
| 0939820 | 20 Ch, 60 ml | 5/100 | 3248396 |
| 0939822 | 22 Ch, 60 ml | 5/100 | 3248404 |
| 0939824 | 24 Ch, 60 ml | 5/100 | 3248410 |
| 0939826 | 26 Ch, 60 ml | 5/100 | 3248427 |

(Beschreibung siehe Seite 185)



Frohmüller-, Mercier-, Dufour-Spitze.